

# 【タービューヘイラー】吸入指導

シムビコート

① アドヒアランスの向上のため、最初に薬の効果について説明を行なう

② 嘔声が出ている患者様には、吸入前の飲水や食前吸入をすすめる。眠前吸入は、薬剤が咽頭に残りやすく勧めない。

- ①薬の効果の説明
- ②用法用量の説明
- ③カウンターの確認・使用可能回数説明


③ 小窓から数字が見える数字が最初は「60or30」だが、最後には「0」が中央まで降りてくる。それ以上数字が下に進まなくなったら新しいものに交換する

(注意点)

初回準備	④空回し	グリップを左右へ回して パルミコートは 2 回 シムビコートは 3 回 カチッと音を鳴らす(最後は左へ回す)	⑤ 正しく薬をセットするために、必ず垂直にして操作する	
	吸入手順	⑤薬のセット	吸入器を垂直に立てて、まず右に止まるまでしっかり回し次に左にカチッと音がするまで回す	⑥ 息吐きしないと、うまく吸入できないため、しっかり息吐きできているか確認する
		⑥息吐き	吸入器の空気穴を塞がずに持つ 吸入口に息を吹きかけないようにして、苦しくない程度に息を吐く	⑦ 粉の感覚はほとんど感じないが、トレーナーの音が鳴り、正しく操作できていれば、薬剤は吸入できている
		⑦薬の吸入	速く深く吸い込む (粉はほとんど感じない)	⑧ DPI は必ずしも息止めが必要ではないが、pMDI との統一をはかるため、息止めを指導する
		⑧息止め	苦しくない程度にできるだけ長く止める(5 秒程度)	⑨ 鼻から息を吐くことで、ゆっくりとした呼気になり、肺の沈着性が良くなる
		⑨息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す	
		⑩もう1度⑥～⑨を計 2 回以上繰り返す		
		⑪1回2吸入以上の場合は⑤～⑩を繰り返す		
		⑫キャップを閉める	グリップは回さない	
	⑬うがい	ガラガラ・ブクブクうがいを各 3 回		
	⑭保管・お手入れの説明	水洗いはしない		

◎正しくできる    ○できているが再確認必要    △できない

## 補助資材

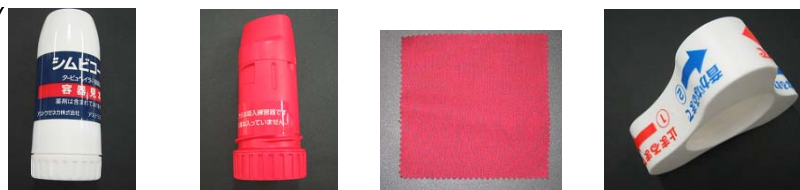

各容器見本    各練習用笛    吸入確認クロス    グリップサポーター

## メモ